

ELI™ Link-software

Verbindt ECG-gegevens met uw zorginformatiesysteem



Communicatiegateway: ECG naar ZIS


ELI Link-software is een Microsoft® Windows®-service die fungeert als communicatiegateway tussen de ECG-gegevens van Welch Allyn en uw zorginformatiesysteem. ELI Link-software maakt gegevensuitwisseling mogelijk voor de volledige lijn van Welch Allyn ELI rust-EGC's en het Rscribe™ PC-gebaseerde ECG.



Ondersteunt alle communicatiemodi

Alle modi voor ECG-communicatie worden ondersteund door ELI Link-software, waaronder LAN, WLAN en GPRS*. ELI Link-software kan worden gebruikt om PDF-, XML- of DICOM®-berichten te exporteren en kan tevens worden gebruikt met een HL7®-interface-engine om HL7-berichten uit te wisselen.

*GPRS is alleen beschikbaar op de ELI™ 150c-elektrocardiograaf voor rust-EGC's.

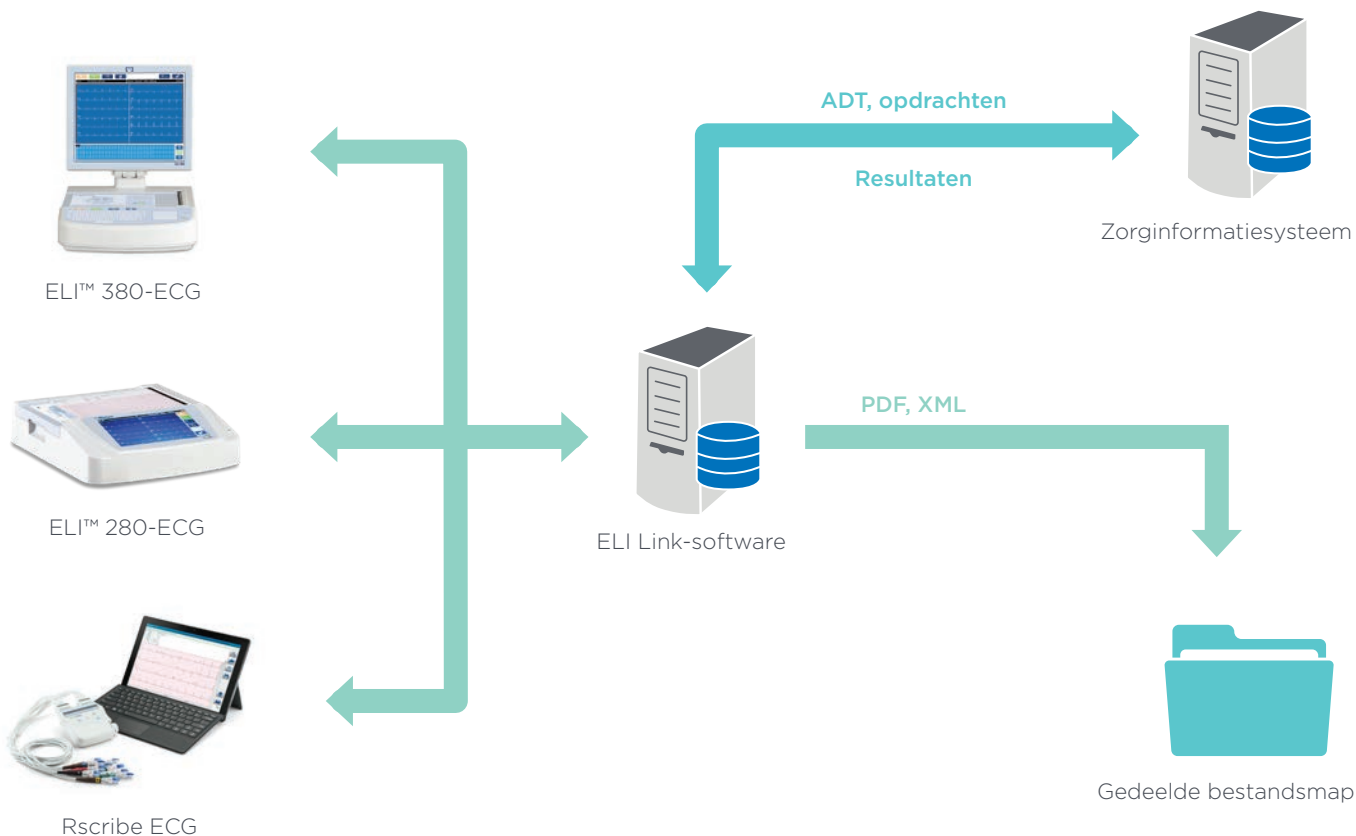

Technische vereisten*

Ondersteunde besturingsystemen	Server 2012 R2 (64-bits) Windows 10 (64-bits)
Database	Microsoft SQL Server 2012 Express (geleverd met ELI Link)
Net	NET Framework 3.5
Geheugen	8 GB**
Schijfruimte	50 GB**

*Afhankelijk van de implementatie van ELI Link-software in uw instelling, kunnen er kosten voor professionele service en projectmanagement worden berekend. Neem contact op met uw Welch Allyn-vertegenwoordiger voor meer informatie.

**Bij gebruik van ADT kan er extra geheugen en schijfruimte nodig zijn. Neem contact op met uw Welch Allyn-vertegenwoordiger als u ADT overweegt.

Neem vandaag nog contact op met uw Welch Allyn-vertegenwoordiger of bezoek emeai.welchallyn.com voor meer informatie.



Klinische topkwaliteit. Verbonden oplossingen. Voortdurende innovatie.
Welch Allyn Cardiologie wordt met trots ondersteund door Mortara.

Welch Allyn EMEA Klantenservice
"Amerika" Building - 7th Floor
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 2061360
infonl@hillrom.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM



WelchAllyn®

Hill-Rom®

©2019 WELCH ALLYN, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DOC. NR.: SM4198-NL-EU R0 MCI5795 , 2019-11

De ELI- en Rscribe-elektrocardiografen zijn bedoeld voor gebruik door artsen en medisch gekwalificeerd personeel om elektrocardiogrammen te maken, te analyseren, weer te geven en af te drukken. De interpretatie van ECG's door de apparaten is alleen significant als een arts deze heeft bekeken en alle andere relevante patiëntgegevens ook in beschouwing zijn genomen. De elektrocardiografen zijn bedoeld voor gebruik bij volwassen en pediatrische patiënten. Medische hulpmiddelen (93/42/EEC): Klasse IIa. Aangemelde instantie: LNE/G-MED (CE0459) Fabrikant: Mortara Instrument, Inc., Milwaukee, Wisconsin, Verenigde Staten Vert. in de EU: Mortara Instrument Europe, Srl, Via Cimara 103-105, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italië. Deze medische hulpmiddelen zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Welch Allyn adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop van haar producten.