

## OVER HILLROM

Hillrom is een wereldwijde marktleider op het gebied van medische technologie. De 10.000 werknemers hebben één doel: het verbeteren van resultaten voor patiënten en hun zorgverleners door het verbeteren van connected care. Over de hele wereld hebben onze innovaties dagelijks invloed op de levens van meer dan 7 miljoen patiënten. De innovaties maken eerdere diagnoses en behandelingen mogelijk, optimaliseren de chirurgische efficiëntie en versnellen het herstel van de patiënt terwijl klinische communicatie wordt vereenvoudigd en zorg dichterbij huis wordt gebracht. Deze resultaten worden mogelijk gemaakt door slimme 'connected' bedden, patiëntenliften, technologieën voor patiëntbeoordeling en -bewaking, samenwerkingshulpmiddelen voor zorgverleners, apparatuur voor respiratoire zorg, geavanceerde apparatuur voor operatiekamers en meer. Dit levert doelgerichte, realtime inzichten op in de point-of-care. Lees meer op [hillrom.com](https://hillrom.com).



**Hillrom**<sup>™</sup>

[hillrom.com](https://hillrom.com)

---

Het Hill Rom 900-bed is bedoeld voor intensieve, acute en ambulante zorgomgevingen en voor patiënten met een gewicht  $\geq 40$  kg, een lengte  $\geq 146$  cm en een BMI  $\geq 17$ .  
Klasse I

Fabrikant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom toekent, is de uitdrukkelijke, schriftelijke garantie die wordt verstrekt bij verkoop of verhuur van zijn producten.



# HILL-ROM® 900 BED

Optimale veiligheid.  
Eenvoudige workflow.

## FUNCTIES EN VOORDELEN

De gescheiden bedheksen kunnen met één hand worden verlaagd en beschikken over een soepel en snel mechanisme, voor snelle toegang tot patiënten

Dankzij een ergonomisch geplaatste handgreep voor uitstappen aan de zijkant van het bed wordt er stabiele ondersteuning geboden tijdens het verlaten van het bed

Intuïtieve bedbediening vereist minimale personeelstraining en helpt om het risico op gebruikersfouten te beperken

De one-touch functie voor uit bed stappen positioneert het bed zodat de patiënt veiliger en eenvoudiger het bed kan verlaten

De AutoContour™ en de SlideGuard™ minimaliseren de patiëntverplaatsing in het bed, waardoor abdominale compressie tijdens het aanpassen van de bedpositie wordt verminderd

De EasyChair™ en de functie voor vlakke positionering bieden patiënten de mogelijkheid om snel een comfortabele zitpositie te bereiken

\* Optie beschikbaar in geselecteerde markten.

De indicator voor lage stand waarschuwt de zorgverlener als het bed zich niet in de laagste positie bevindt en draagt op die manier bij aan een veiligere patiëntomgeving

Het vijfde zwenkwiel maakt het bedtransport in elke richting eenvoudiger

De one-touch functie voor shockpositionering maakt het bovenste platform vlak en plaatst het bed in de Trendelenburg-positie wanneer er complicaties optreden bij de patiënt

Intelligent nachtlampje verbetert de gebruiksveiligheid voor zowel patiënten als zorgverleners


Waarschuwt zorgverleners als een patiënt mogelijk het bed heeft verlaten via het bed verlaten-alarm met 3 standen. Beschikbaar met mogelijkheden voor bewaking op afstand\*

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Veilige werkbelasting 220 kg 250 kg	+ o
Gewicht van het bed	144 kg
Hoogte-aanpassing	38,9 tot 76,8 cm
Verstelbare rugsteun met SlideGuard	maximaal 12 cm
Beschermingsklasse	IPX4
Mogelijke hoeken van bed Hoofdgedeelte Bovenbeengedeelte Voetengedeelte Trendelenburg/anti-Trendelenburg	0 tot 65° 0 tot 28° -22 tot -3° -17 tot +17°
Ligvlak Breedte Lengte	90 cm 200 cm
Oppervlak van ligvlak	Hogedruklaminaat (HPL)
Hoogte bedhekken	39,3 cm
Zwenkwielen Geïntegreerde zwenkwielen van 150 mm Dubbele zwenkwielen van 125 mm** Dubbele zwenkwielen van 150 mm	+ o o
Stuurwiel Bij hoofdeinde Bij voeteneinde	+ o
5e zwenkwiel	o
Rem- en stuurpedalen Bij voeteneinde Bij voeten- en hoofdeinde**	+ o
Indicator rem-los	o
Bed-verlaten-alarm met 3 niveaus	o
Oproepsysteem voor verpleegkundigen	o
Bedieningsknoppen Geïntegreerd in de bedhekken Niet geïntegreerd in de bedhekken (handbediening) Handbediening** Bediening op flexibele arm** Handbediening voor zorgverleners bij voeteneinde** Bilaterale voetbediening hoog-laag	+ o o o o o
Hoofdgedeelte Mobiel Vast	+ o
Indicator voor laagste stand**	+
EasyChair-functie en functie voor vlakke positionering	+
Intelligent nachtlampje	o
One-touch-functie voor shockpositionering**	o
Bedverlenging met linnenhouder	o

+ = inbegrepen; o = optioneel

\*\* Alleen beschikbaar in combinatie met geselecteerde opties. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Hillrom-vertegenwoordiger.

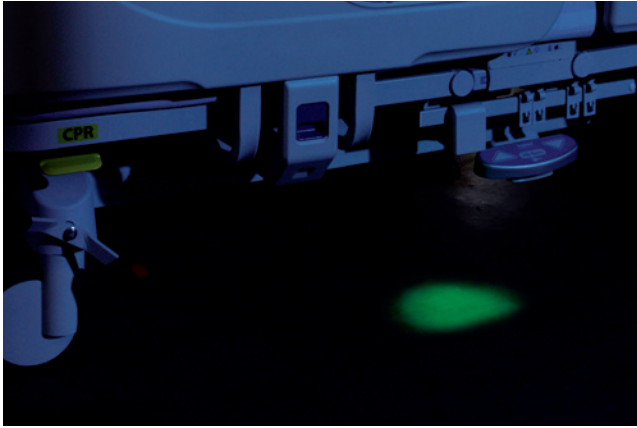

Optioneel intelligent nachtlampje



Indicator voor lage stand en positionering voor uit bed stappen met one-touch functie



Optionele dubbele zwenkwielen van 125 mm\*\*



Optioneel bed-verlaten-alarm met 3 niveaus



Care Grip-handgrepen en geïntegreerde bedieningselementen



Optionele bilaterale voetbediening hoog-laag met automatische vergrendeling en vijfde stuurwiel

## EXTRA STANDAARDFUNCTIES

- Mechanische hendel aan beide zijden voor reanimatie
- 6 bevestigingspunten voor patiëntfixatiebanden
- Uitschuifbare infuuspaaalhouders
- Bilaterale accessoirehouder
- Houder voor elektrische snoeren
- Verstelbare matrashouders
- Accu
- Verwijderbaar hoofd- en voetenbord
- Line-of-Site-rugsteun en Trendelenburg-indicatoren
- Positionering voor uit bed stappen met one-touch functie
- Centrale rem
- Onderhoudsindicator