


Hill-Rom NP100 Bidensity

Efficiënte en veilige decubituspreventie

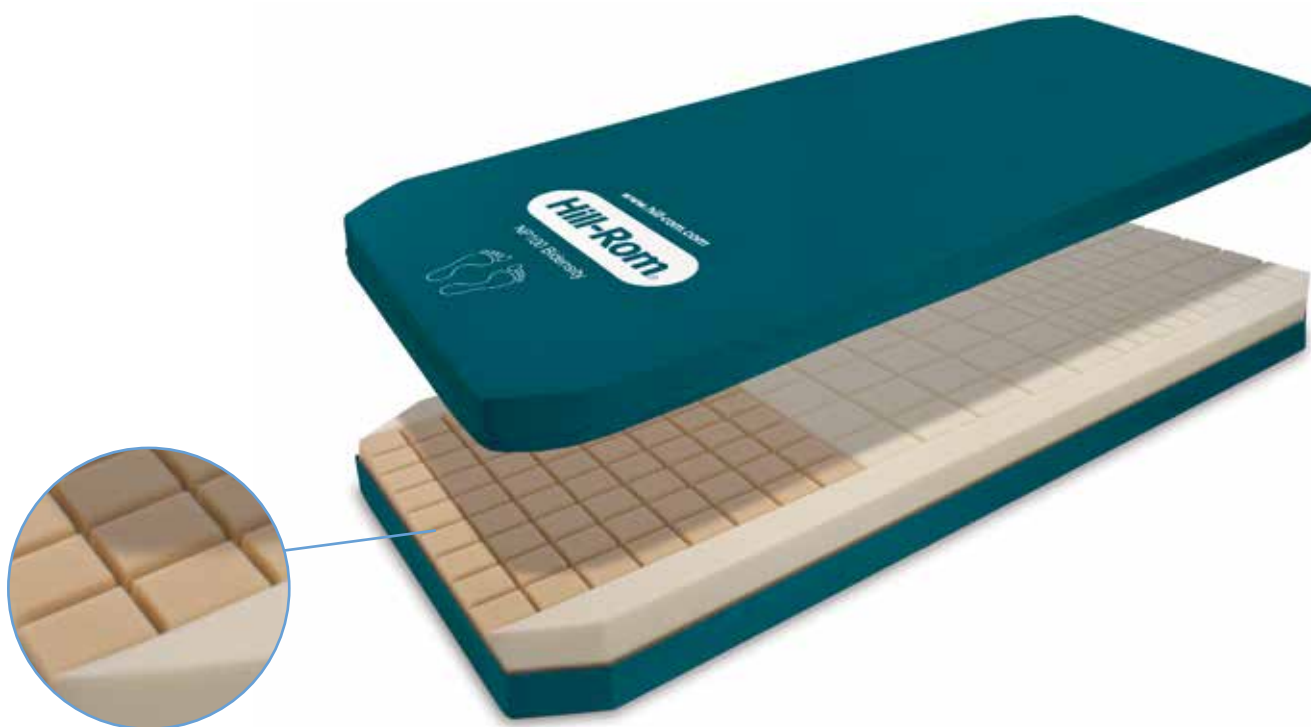

Kenmerken en voordelen

- Het blokvormige foam past zich afzonderlijk aan de vorm van het lichaam aan en verlaagt de contactoppervlakdruk en de wrijving
- De afzonderlijke blokken bevorderen de luchtstroom en verminderen daarmee de ophoping van vocht, wat zorgt voor minder verweking en verschuiving
- De hielzone heeft een lage dichtheid en biedt zachte ondersteuning voor de hielen en enkels
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
- De zijanten hebben een hoge dichtheid voor de veiligheid van de patiënt en zodat deze gemakkelijker uit bed kan komen
- Geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan alle bedposities aan
- Hoes met gelaste naden en ingebouwde handgrepen

Hill-Rom NP100 Bidensity

Matras van zeer veerkrachtig foam met twee verschillende dichtheden

Dankzij het blokvormige foam met twee verschillende dichtheden verlaagt het Hill-Rom NP100 Bidensity-matras de druk op het contactoppervlak en de wrijving door zich geheel aan te passen aan de vorm van de patiënt. Het blokvormige foam bevordert de luchtstroom onder het oppervlak en vermindert daarmee de ophoping van vocht, wat zorgt voor minder verweking en verschuiving.

Het Hill-Rom NP100 Bidensity-matras is een kostenbesparende oplossing om huidbeschadigingen en decubitus te helpen voorkomen. De hielzone met lage dichtheid biedt bovendien zachte ondersteuning voor de hielen en enkels. Het matras is geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan alle bedposities aan.

Voor optimale hygiëne voor patiënten en zorgverleners is het matras volledig omsloten door een bacterie- en schimmelwerende hoes van elastisch polyurethaan. Deze hoes is waterbestendig, waterdampdoorlatend en bovendien eenvoudig te reinigen en desinfecteren.



Hill-Rom NP100 Bidensity is ook verkrijgbaar in 1 extra lang formaat

Standaardformaat: 198 cm

+5 cm

Technische specificaties

Matras (verkrijgbaar in aangepaste formaten)

Lengte	198 of 203 cm
Breedte	85 of 90 cm
Hoogte	14 cm

Garantie:

Hill-Rom biedt een garantie van 5 jaar op het foam en 2 jaar op de hoes. Voor meer informatie over deze garantie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger.

Veilige werkbelasting 250 kg

Aanbevolen therapeutisch gewicht 30 tot 150 kg

Naden gelast/gestikt

Desinfectie

Geschikt voor oplossingen op chloorbasis. De concentratie moet lager dan of gelijk aan 1000 ppm zijn (of 10.000 ppm bij de XT-versie).

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, bewaking en diagnostisering van patiënten, chirurgische veiligheid en efficiëntie en respiratoire gezondheid.** De mensen, producten en programma's van Hill-Rom werken samen met één doel voor ogen: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners.**

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar.

Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

Het oppervlak van de Hill-Rom NP 100 helpt in verschillende zorgomgevingen om decubitus te voorkomen bij patiënten die geen of gemiddeld risico lopen, tussen de 30 kg en 150 kg wegen en minimaal 1,46 meter lang zijn.

Klasse I

Fabrikant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Doc. Nr: 5NL116304-03, 03 oktober 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom