



Hillrom™



Hillrom™ P290- matras


EEN SAFE SKIN-OMGEVING VOOR UW PATIËNTEN

Decubitus komt vaak voor en de behandeling ervan is duur. Het P290-oplegmatras of het matrasvervangend systeem van Hillrom is daarom ontworpen om decubitus bij volwassen patiënten met een laag tot hoog risico te voorkomen en te behandelen. Het P290-matras biedt een aanpasbaar niveau van inzakking en omsluiting in zowel alternerende als continue lagedruktherapiemodi.

Deze therapeutische aanpak vermindert compressie van kwetsbare weefsels en is in overeenstemming met de internationale NPIAP/EPUAP/PPPIA-richtlijnen die artsen adviseren 'een actieve ligondersteuning te gebruiken voor patiënten met een hoger risico op de ontwikkeling van decubitus als regelmatig handmatig repositioneren niet mogelijk is.'¹

Hillrom™ P290-matras

OPLEGMATRAS EN MATRASVERVANGEND THERAPIESYSTEEM

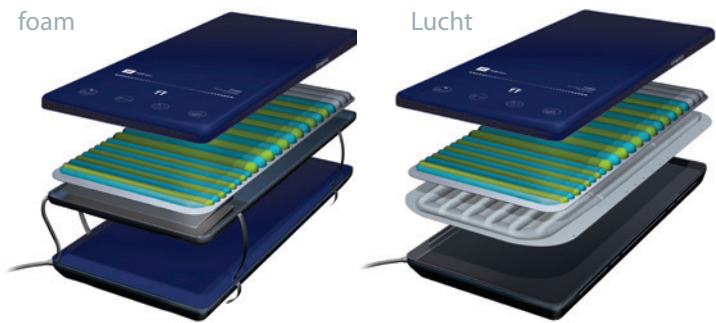

KENMERKEN EN VOORDELEN

Speciaal ontworpen voor verbeterde preventie en behandeling van patiënten met risico op of met decubitus.

Een keuze uit alternerende of continue lagedruktherapieën om te kunnen voldoen aan de behoeften van de patiënt en de klinische voorkeur.

Instelbare cyclustijden en stevigheidsinstellingen voor meer controle over de therapie en het comfort van de patiënt.

Veiligheidsfuncties voor patiënt en zorgverlener, waaronder automatische vergrendeling van het bedieningspaneel, foutindicatoren en transportmodus van 10 uur.

Drie drukverdelende zones bieden extra bescherming voor kwetsbare lichaamsdelen, waaronder de hielzone met helling van 5°.

P-MAX en PLUS-opblaasopties voor extra ondersteuning en veiligheid tijdens positionering en transfer van de patiënt.

Vervangende matrassen beschikbaar met een patiëntondersteuningslaag van lucht of foam.

Röntgenhoes voor het vergemakkelijken van röntgenopnamen in bed en voor meer patiëntcomfort.

Evacuatiehandgrepen ter ondersteuning bij het verplaatsen van patiënten tijdens een noodgeval.

hillrom.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES

OPLEGMATRAS

Lengte	200 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	10 cm
Gewicht	6,1 kg

VERVANGENDE MATRAS - SCHUIM

Lengte	200 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	17 cm
Gewicht	12 kg

VERVANGENDE MATRAS - LUCHT

Lengte	200 cm
Breedte	90 cm
Hoogte	17 cm
Gewicht	7,5 kg

BEDIENINGSEENHEID

Lengte	90 cm
Breedte	20 cm
Hoogte	12 cm
Gewicht	2,2 kg

Veilige werkbelasting 250 kg

Aanbevolen therapeutisch gewicht 30 tot 140 kg

Materiaal hoes

Polyurethaan coating op polyester materiaal, 360°-rits, gelaste naden, lage wrijving, in twee richtingen rekbaar, waterdampdoorlatend, bacteriewerend, schimmelwerend en antimicrobieel. Kan worden afgeveegd en gewassen. Reinigingsoplossingen op basis van chloor (≤ 1000 ppm) kunnen worden gebruikt.

¹EPUAP/NPIAP/PPPIA International Guidelines for the Prevention & Treatment of Pressure Ulcers, 2014.

Het P290-matras helpt in verschillende zorgomgevingen decubitus van categorie I, II en III te voorkomen bij patiënten met een laag tot hoog risico met een minimaal gewicht van 30 kg en een minimale lengte van 1,46 m.

Klasse IIa

Aangemelde instantie: LNE/G-Med CE0459

Fabrikant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van zijn producten.