


Liko™ Multirall™ 200

Een plafondlift met flexibele mogelijkheden

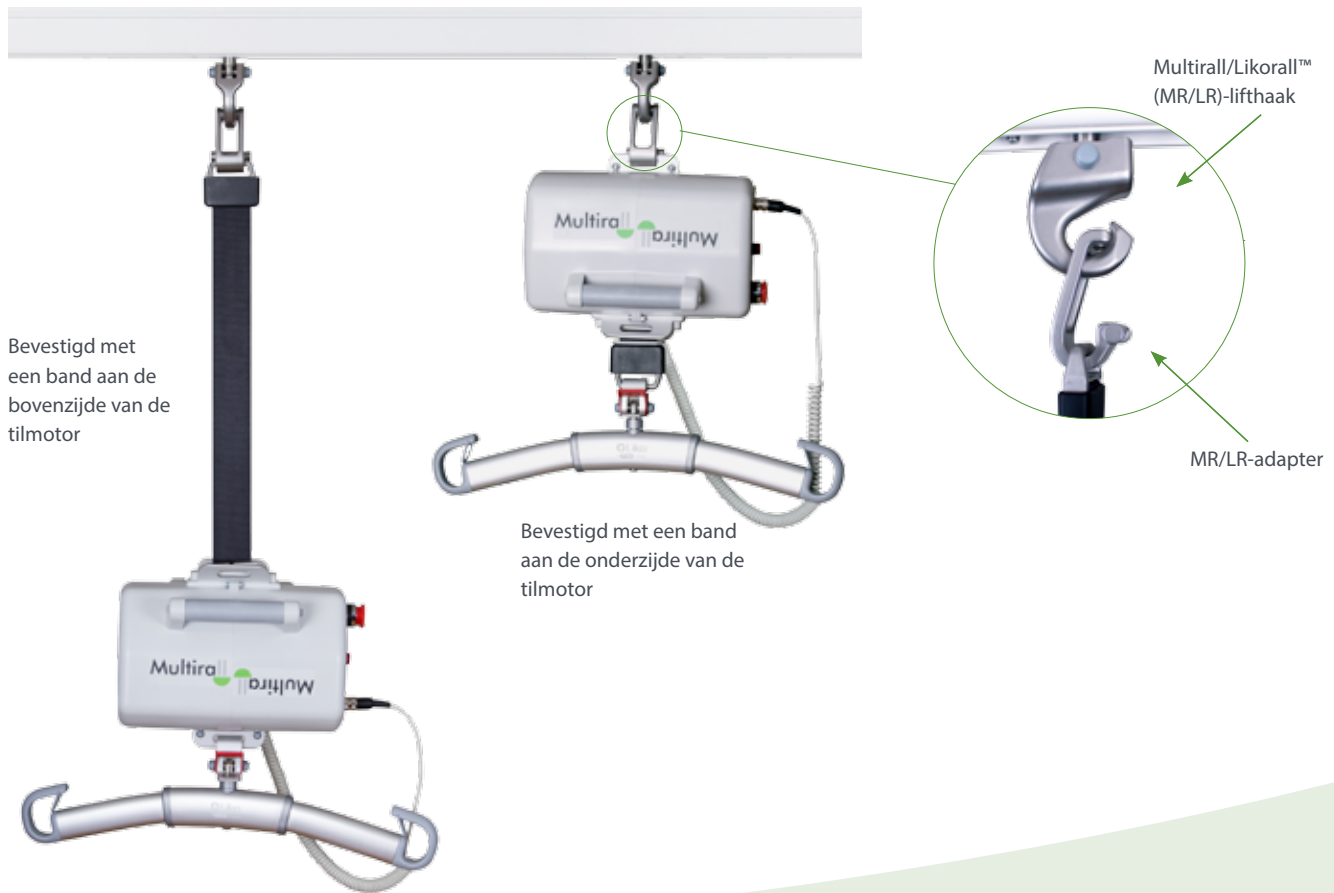

In zorgomgevingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen varieert de behoefte aan tilmogelijkheden, afhankelijk van de mobiliteit van de patiënt. Een draagbare plafondlift kan een goed alternatief zijn voor een mobiele lift. Multirall biedt een kostenbesparende en draagbare tiloplossing. Het systeem kan ook worden gebruikt om een patiënt in een zithouding over te zetten tussen kamers, waarbij eenvoudig van het ene railsysteem naar het andere kan worden overgegaan met behulp van een kamer-naar-kamerband.

Kenmerken en voordelen

Het systeem kan op twee manieren worden bevestigd:

1. Met de band aan de onderzijde van de tilmotor, voor stationair gebruik
2. Met de band aan de bovenzijde van de tilmotor, voor mobiel gebruik

The MR/LR-adapter kan op een veilige en gebruiksvriendelijke manier worden bevestigd tussen de Multirall en de MR/LR-lifthaak, ongeacht de manier waarop het is bevestigd

Eenvoudig te verplaatsen met het optionele MR-adapterverlengstuk, hiervoor is geen gereedschap nodig

Grote handgrepen aan beide zijden van de motor voor eenvoudig transporteren

Te gebruiken met alle Liko-railsystemen, inclusief FreeSpan™, de vrijstaande optie

Er is een breed assortiment aan accessoires verkrijgbaar met onder andere tilbanden, tiljukken, weegschalen en de Multirall-trolley

Liko Multirall 200

Technische specificaties

Veilige werklust	200 kg
Gewicht tilmotor	8,7 kg
Tiljukoptyes	Mini-tiljuk 220, Universal-tiljuk 350, Universal 450, Universal 600, Universal TwinBar 670, Crossbar
Koppelingen van tiljuk	Snelkoppeling
Veiligheidsklasse tilmotor	IP 30
Nooddaalfunctie	handmatig en elektrisch
Tilsnelheid	60 mm / sec
Tilinterval	1600 mm

Geluidsniveau	62,2 dB(A)
Accu	2 x 12 V DC (2,4 Ah - 2,6 Ah) ventielgereguleerd loodzuur gelaccu's
Acculader	opladen in stopcontact
Handbediening	bekabeld
Veiligheidsklasse handbediening	IP 43
Productnummer	3130001

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en in alle zorgomgevingen, en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, chirurgische veiligheid en efficiëntie en respiratoire gezondheid**. De mensen, producten en programma's van Hill-Rom werken samen met één doel voor ogen: **elke dag, wereldwijd, verbeteren we resultaten voor onze patiënten en hun zorgverleners**.

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

De Liko Multirall 200 is bedoeld voor gebruik in normale til- en transfersituaties, zoals van bed naar rolstoel, van en naar de grond, toilettransfers, looptraining en horizontaal tillen van stretchers.

Klasse I

Fabrikant: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Zweden

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd, zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Doc. nr.: 5NL183328-01, 29 september 2017

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom