

Golvo™ 9000/LowBase™ mobiele lift

Ontworpen voor veelzijdigheid



Golvo 9000



Golvo 9000 LowBase

De Golvo 9000-lift combineert de functionele voordelen van een plafondblift met de flexibiliteit van een mobiele lift. In combinatie met het uitgebreide aanbod aan Liko-accessoires is de Golvo-lift ideaal voor gebruikelijke tilsituaties in verschillende zorgomgevingen.

Kenmerken en voordelen

De **verticale tilbeweging** met een flexibele liftband is ideaal voor horizontaal tillen, looptraining en tillen vanaf de vloer

Dankzij de **parallele breedteaanpassing van het onderstel** kunnen patiënten of bewoners eenvoudiger worden getild uit hun stoel, bed of vanaf de vloer

Met de **LowBase-versie** kan de lift nog eenvoudiger onder lage bedden of stretchers worden geplaatst dan het standaardmodel

De armsteunen **ondersteunen de patiënt tijdens de looptraining** en zorgen ervoor dat zorgverleners de lift eenvoudig kunnen verplaatsen

Op het **gebruikersdisplay** wordt het apparaatgebruik weergegeven, waaronder een tilteller, onderhoudslampje en overbelastingsindicator

Optioneel **haaksysteem met snelkoppeling** waarmee zorgverleners eenvoudig en snel een tiljuk kunnen verwisselen of een weegschaal kunnen bevestigen

De **ergonomische handbediening** voor de bediening van de lift beschikt over indicatoren voor accustatus en overbelasting

Er is een **breed assortiment aan accessoires** verkrijgbaar met onder andere tilbanden, tiljukken en weegschalen

Door de **twee tilsnelheden** kan de tillift worden gebruikt in een groot aantal tilsituaties

Golvo™ 9000/LowBase™ mobiele lift




Tilarm



LowBase - hoogte onderstel



Handbediening

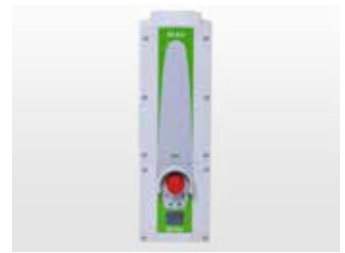

Bedieningspaneel

Technische specificaties

Maximale belasting	200 kg
Gewicht - 9000	
met loodaccu	41,6 kg
met lithium-ionaccu	40,2 kg
Gewicht - 9000 LowBase	
met loodaccu	45 kg
met lithium-ionaccu	43,6 kg
Hoogte	
9000	2090 mm
LowBase	2090 mm
Veiligheidsklasse	IPX4
Veiligheidsklasse handbediening	IPX4
Tiljukoptyes	
standaard	Universal 450 Slingbar (450 mm)
optioneel	Mini Slingbar 220, Universal Slingbar 350, Universal TwinBar 670, Kruisjukken
Base - 9000	
hoogte	105 mm
lengte	1185 mm
breedte	735-1020 mm

Base - 9000 LowBase	
hoogte	60/105 mm
lengte	1185 mm
breedte	745-1028 mm
Basis - breedteaanpassing	elektrisch
Zwenkwielen	
voorzijde - 9000	75 mm dubbele band
voorzijde - LowBase	46 mm dubbele band
achterzijde	75 mm dubbele band
Materiaal	aluminium
Noodtilfunctie	elektrisch
Nooddaalfunctie	handmatig en elektrisch
Tilnelheid (zonder belasting)	27 mm/sec of 37 mm/sec
Tilinterval	1245 mm
Maximale tilhoogte	1816 mm
Geluidsniveau	52,8 dB(A)
Accutype	loodzuurgel of lithium-ion
Lader	ingebouwd
Handbediening	bekabeld
Productnummer	
9000	2000045
LowBase	2000049

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie met meer dan 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met zorgverleners in meer dan honderd landen en richten ons daarbij op oplossingen voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op vijf kerngebieden: **bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, patiëntbewaking en diagnostiek, chirurgische veiligheid en efficiëntie, en respiratoire gezondheid.** Wereldwijd werken de mensen, programma's en producten van Hill-Rom samen aan één missie: **het verbeteren van de resultaten voor patiënten en hun zorgverleners.**

Niet alle producten/opties zijn in alle landen verkrijgbaar. Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze website bezoeken:

www.hill-rom.com

De Golvo 9000 mobiele lift is bedoeld voor het tillen en vervoeren van patiënten in verschillende situaties waarin zorgverlening nodig is.

Klasse I

Fabrikant: Liko AB, Nedre vägen 100, SE-975 92 Luleå, Zweden

Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen.

Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Doc. Nr.: SEN183304-01, 13 maart 2018

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom